

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月 5日

Toshihide EZOE, et al.
BIOSENSOR
Mark Boland
February 18, 2004
2 of 6

Q79759

202-293-7060


出願番号
Application Number: 特願2003-058729
[ST. 10/C]: [JP 2003-058729]

出願人
Applicant(s): 富士写真フイルム株式会社

2004年 1月 5日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康

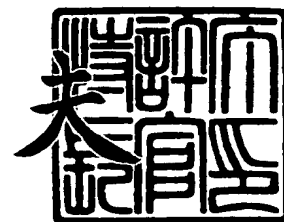

出証番号 出証特2003-3108539

【書類名】 特許願

【整理番号】 A31102A

【提出日】 平成15年 3月 5日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01N 33/543

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 久保 利昭

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 江副 利秀

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 山之内 淳一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 塚田 芳久

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 110000109

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】 今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 170347

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0205141

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 バイオセンサーを用いた検出又は測定方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーの表面に結合した生理活性物質と相互作用する物質を検出又は測定する方法において、該検出又は測定を界面活性剤の存在下で行う上記の方法。

【請求項 2】 バイオセンサーが疎水性高分子化合物でコーティングした金属表面あるいは金属膜から成る、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 金属表面あるいは金属膜が、金、銀、銅、白金又はアルミニウムからなる群より選ばれる自由電子金属からなるものである、請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 4】 界面活性剤が非イオン性界面活性剤である、請求項 1 から 3 の何れかに記載の方法。

【請求項 5】 疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーであって表面に生理活性物質が共有結合により結合しているバイオセンサーに対して、少なくとも被験物質と界面活性剤を含む溶液を接触させる、請求項 1 から 4 の何れかに記載の方法。

【請求項 6】 被験物質と界面活性剤を含む溶液中における界面活性剤の濃度が 0.0001 重量%以上 1 重量%以下である、請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】 生理活性物質と相互作用する物質を非電気化学的方法により検出または測定する、請求項 1 から 6 の何れかに記載の方法。

【請求項 8】 生理活性物質と相互作用する物質を表面プラズモン共鳴分析により検出または測定する、請求項 1 から 7 の何れかに記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、バイオセンサーを用いた生体分子間の相互作用を分析する方法に関する。特に本発明は、表面プラズモン共鳴バイオセンサーに用いるためのバイオセンサーを用いた生体分子間の相互作用を分析する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

現在、臨床検査等で免疫反応など分子間相互作用を利用した測定が数多く行われているが、従来法では煩雑な操作や標識物質を必要とするため、標識物質を必要とすることなく、測定物質の結合量変化を高感度に検出することのできるいくつかの技術が使用されている。例えば、表面プラズモン共鳴（SPR）測定技術、水晶発振子マイクロバランス（QCM）測定技術、金のコロイド粒子から超微粒子までの機能化表面を使用した測定技術である。SPR測定技術はチップの金属膜に接する有機機能膜近傍の屈折率変化を反射光波長のピークシフト又は一定波長における反射光量の変化を測定して求めることにより、表面近傍に起こる吸着及び脱着を検知する方法である。QCM測定技術は水晶発振子の金電極（デバイス）上の物質の吸脱着による発振子の振動数変化から、ngレベルで吸脱着質量を検出できる技術である。また、金の超微粒子（nmレベル）表面を機能化させて、その上に生理活性物質を固定して、生理活性物質間の特異認識反応を行わせることによって、金微粒子の沈降、配列から生体関連物質の検出ができる。

【0003】

上記した技術においては、いずれの場合も、生理活性物質を固定化する表面が重要である。以下、当技術分野で最も使われている表面プラズモン共鳴（SPR）を例として、説明する。

【0004】

一般に使用される測定チップは、透明基板（例えば、ガラス）、蒸着された金属膜、及びその上に生理活性物質を固定化できる官能基を有する薄膜からなり、その官能基を介し、金属表面に生理活性物質を固定化する。該生理活性物質と検体物質間の特異的な結合反応を測定することによって、生体分子間の相互作用を分析する。

【0005】

生理活性物質を固定化できる官能基を有する薄膜としては、金属と結合する官能基、鎖長の原子数が10以上のリンカー、及び生理活性物質と結合できる官能基を有する化合物を用いて、生理活性物質を固定化した測定チップが報告されて

いる（特許文献1を参照）。また、金属膜と、該金属膜の上に形成されたプラズマ重合膜からなる測定チップが報告されている（特許文献2を参照）。

【0006】

一方、生理活性物質と検体物質間の特異的な結合反応を測定する場合、検体物質は必ずしも単一成分ではなく、例えば細胞抽出液中などのような不均一系で検体物質を測定することも要求される。その場合、種々の蛋白質、脂質などの夾雑物が検出表面に非特異的な吸着を起こすと、測定検出感度が著しく低下する。上記の検出表面では、非特異吸着が極めて起こりやすく問題があった。

【0007】

この問題を解決するためにいくつかの方法が検討されている。例えば、金属表面にリンカーを介し、親水性のハイドロゲルを固定化することで、物理吸着を抑制する方法も使用されてきた（特許文献1、特許文献3及び特許文献4を参照）。しかしながら、この方法でも非特異吸着の抑制性は十分なレベルではなかった。

【0008】

【特許文献1】

特許第2815120号

【特許文献2】

特開平9-264843号

【特許文献3】

米国特許第5436161号

【特許文献4】

特開平8-193948号公報

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記した従来技術の問題を解消することを解決すべき課題とした。即ち、本発明は、バイオセンサーを用いた生理活性物質と相互作用する物質を検出または測定する方法において被験物質中の夾雑物の非特異吸着を抑制する方法を提供することを解決すべき課題とした。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、基板の表面を疎水性高分子化合物でコーティングしたバイオセンサーを用いて生理活性物質と相互作用する物質を検出または測定する際に、界面活性剤の存在下で検出または測定を行うことによって、被験物質中の夾雑物の非特異吸着を抑制できることを見出した。本発明はこの知見に基づいて完成したものである。

【0011】

即ち、本発明によれば、疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーの表面に結合した生理活性物質と相互作用する物質を検出又は測定する方法において、該検出又は測定を界面活性剤の存在下で行う上記の方法が提供される。

【0012】

好ましくは、本発明で用いるバイオセンサーは、疎水性高分子化合物でコーティングした金属表面あるいは金属膜から成るバイオセンサーである。

好ましくは、金属表面あるいは金属膜は、金、銀、銅、白金又はアルミニウムからなる群より選ばれる自由電子金属からなる。

【0013】

好ましくは、界面活性剤は非イオン性界面活性剤である。

好ましくは、本発明の方法においては、疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーであって表面に生理活性物質が共有結合により結合しているバイオセンサーに対して、少なくとも被験物質と界面活性剤を含む溶液を接触させる。

好ましくは、被験物質と界面活性剤を含む溶液中における界面活性剤の濃度は0.0001重量%以上1重量%以下である。

【0014】

好ましくは、生理活性物質と相互作用する物質を非電気化学的方法により検出または測定する。

さらに好ましくは、生理活性物質と相互作用する物質を表面プラズモン共鳴分

析により検出または測定する。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について説明する。

本発明は、疎水性高分子化合物でコーティングしたバイオセンサーの表面に結合した生理活性物質と相互作用する物質を検出又は測定する方法において、該検出又は測定を界面活性剤の存在下で行うことを特徴とする方法である。

【0016】

本発明で用いる界面活性剤は、例えば、ノニオン系、アニオン系、及びカチオン系の界面活性剤である。アニオン系もしくはカチオン系の場合、界面活性剤の荷電と反対荷電に帯電した夾雑物の非特異吸着を促進する場合があるため、ノニオン系界面活性剤の使用がより好ましい。

【0017】

具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート (TweenTM 20)、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート (TweenTM 80)、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル (TritonTM X-100)、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、グリセリンモノラウレート、グリセリンモノパルミテート、グリセリンモノステアレート、グリセリンモノオレエート、ベンタエリスリトールモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノベヘネート、ソルビタンジステアレート、ジグリセリンモノオレエート、トリグリセリンジオレエート、ナトリウムラウリルサルフェート、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、ドデシルアミン塩酸塩、ラウリル酸ラウリルアミドエチルリン酸塩、トリエチルセチルアンモニウムイオダイド、オレイルアミノジエチルアミン塩酸塩、ドデシルピリジニウム塩酸塩等の塩基性ピリジニウム塩等が挙げられる。このうち、特に好ましいものは、炭素数が14～22の脂肪酸と、ソルビタン、ソルビトール、グリセリン、ポリ

グリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコールとのエステル又はそのアルキレンオキサイド付加物を主成分とする非イオン系界面活性剤等が挙げられる。

【0018】

検出又は測定を界面活性剤の存在下で行うためには、例えば、疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーであって表面に生理活性物質が共有結合により結合しているバイオセンサーに対して、被験物質と界面活性剤を含む溶液を接触させることができる。ここで用いる被験物質と界面活性剤を含む溶液中における界面活性剤の濃度は、被験物質中の夾雑物の非特異吸着を抑制できる限り、特に限定されないが、好ましくは、0.0001重量%以上1重量%以下であり、さらに好ましくは、0.001重量%以上0.1重量%以下である。

【0019】

本発明で用いるバイオセンサーは、疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成ることを特徴とする。

本発明で言うバイオセンサーとは最も広義に解釈され、生体分子間の相互作用を電氣的信号等の信号に変換して、対象となる物質を測定・検出するセンサーを意味する。通常のバイオセンサーは、検出対象とする化学物質を認識するレセプター部位と、そこに発生する物理的变化又は化学的变化を電気信号に変換するトランスデューサー部位とから構成される。生体内には、互いに親和性のある物質として、酵素／基質、酵素／補酵素、抗原／抗体、ホルモン／レセプターなどがある。バイオセンサーでは、これら互いに親和性のある物質の一方を基板に固定化して分子認識物質として用いることによって、対応させるもう一方の物質を選択的に計測するという原理を利用している。

【0020】

本発明で用いる疎水性高分子化合物は、吸水性を有しない高分子化合物であり、水への溶解度（25℃）が10%以下、より好ましくは1%以下、最も好ましくは0.1%以下である。

【0021】

疎水性高分子化合物を形成する疎水性単量体としては、ビニルエステル類、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、オレフィン類、スチレン類、クロトン酸エステル類、イタコン酸ジエステル類、マレイン酸ジエステル類、フマル酸ジエステル類、アリル化合物類、ビニルエーテル類、ビニルケトン類等から任意に選ぶことができる。疎水性高分子化合物としては、1種類のモノマーから成るホモポリマーでも、2種類以上のモノマーから成るコポリマーでもよい。

【0022】

本発明で好ましく用いられる疎水性高分子化合物としては、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリビニルクロライド、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル、ナイロンなどが挙げられる。

【0023】

疎水性高分子化合物の基板へのコーティングは常法によって行うことができ、例えば、スピン塗布、エアナイフ塗布、バー塗布、ブレード塗布、スライド塗布、カーテン塗布、さらにはスプレー法、蒸着法、キャスト法、浸漬法等によって行うことができる。

【0024】

疎水性高分子化合物のコーティング厚さは特に限定されないが、好ましくは1オングストローム以上5000オングストローム以下であり、特に好ましくは10オングストローム以上3000オングストローム以下である。

【0025】

本発明で用いるバイオセンサーは、金属表面又は金属膜を疎水性高分子化合物でコーティングしたものであることが好ましい。金属表面あるいは金属膜を構成する金属としては、例えば、表面プラズモン共鳴バイオセンサー用を考えた場合、表面プラズモン共鳴が生じ得るようなものであれば特に限定されない。好ましくは金、銀、銅、アルミニウム、白金等の自由電子金属が挙げられ、特に金が好ましい。それらの金属は単独又は組み合わせて使用することができる。また、上記基板への付着性を考慮して、基板と金属からなる層との間にクロム等からなる介在層を設けてもよい。

【0026】

金属膜の膜厚は任意であるが、例えば、表面プラズモン共鳴バイオセンサー用を考えた場合、1オングストローム以上5000オングストローム以下であるのが好ましく、特に10オングストローム以上2000オングストローム以下であるのが好ましい。5000オングストロームを超えると、媒質の表面プラズモン現象を十分検出することができない。また、クロム等からなる介在層を設ける場合、その介在層の厚さは、1オングストローム以上、100オングストローム以下であるのが好ましい。

【0027】

金属膜の形成は常法によって行えばよく、例えば、スパッタ法、蒸着法、イオンプレーティング法、電気めっき法、無電解めっき法等によって行うことができる。

【0028】

金属膜は好ましくは基板上に配置されている。ここで、「基板上に配置される」とは、金属膜が基板上に直接接触するように配置されている場合のほか、金属膜が基板に直接接触することなく、他の層を介して配置されている場合をも含む意味である。本発明で使用する事ができる基板としては例えば、表面プラズモン共鳴バイオセンサー用を考えた場合、一般的にはBK7等の光学ガラス、あるいは合成樹脂、具体的にはポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマーなどのレーザー光に対して透明な材料からなるものが使用できる。このような基板は、好ましくは、偏光に対して異方性を示さずかつ加工性の優れた材料が望ましい。

【0029】

本発明で用いる疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーにおいては、基板の最表面に生理活性物質を固定化することができる官能基を有することが好ましい。ここで言う「基板の最表面」とは、「基板から最も遠い側」という意味であり、さらに具体的には、「基板上にコーティングした疎水性高分子化合物中の基板から最も遠い側」という意味である。

【0030】

好ましい官能基としては -OH 、 -SH 、 -COOH 、 $\text{-NR}^1\text{R}^2$ (式中、R

R^1 及び R^2 は互いに独立に水素原子又は低級アルキル基を示す)、 $-CHO$ 、 $-NR^3NR^1R^2$ (式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は互いに独立に水素原子又は低級アルキル基を示す)、 $-NCO$ 、 $-NCS$ 、エポキシ基、またはビニル基などが挙げられる。ここで、低級アルキル基における炭素数は特に限定されないが、一般的には $C1 \sim C10$ 程度であり、好ましくは $C1 \sim C6$ である。

【0031】

最表面にそれらの官能基を導入する方法としては、それらの官能基の前駆体を含有する疎水性高分子を金属表面あるいは金属膜上にコーティングした後、化学処理により最表面に位置する前駆体からそれらの官能基を生成させる方法が挙げられる。例えば $-COOCH_3$ 基を含有する疎水性高分子化合物であるポリメチルメタクリレートを金属膜上にコーティングした後、その表面を $NaOH$ 水溶液(1N)に $40^\circ C$ 16時間接触させると、最表面に $-COOH$ 基が生成する。

【0032】

上記のようにして得られたバイオセンサー用表面において、上記の官能基を介して生理活性物質を共有結合させることによって、金属表面又は金属膜に生理活性物質を固定化することができる。

【0033】

本発明で用いるバイオセンサー用表面上に固定される生理活性物質としては、測定対象物と相互作用するものであれば特に限定されず、例えば免疫蛋白質、酵素、微生物、核酸、低分子有機化合物、非免疫蛋白質、免疫グロブリン結合性蛋白質、糖結合性蛋白質、糖を認識する糖鎖、脂肪酸もしくは脂肪酸エステル、あるいはリガンド結合能を有するポリペプチドもしくはオリゴペプチドなどが挙げられる。

【0034】

免疫蛋白質としては、測定対象物を抗原とする抗体やハプテンなどを例示することができる。抗体としては、種々の免疫グロブリン、即ち IgG 、 IgM 、 IgA 、 IgE 、 IgD を使用することができる。具体的には、測定対象物がヒト血清アルブミンであれば、抗体として抗ヒト血清アルブミン抗体を使用することができる。また、農薬、殺虫剤、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、抗生物質、麻

薬、コカイン、ヘロイン、クラック等を抗原とする場合には、例えば抗アトラジン抗体、抗カナマイシン抗体、抗メタンフェタミン抗体、あるいは病原性大腸菌の中でO抗原26、86、55、111、157などに対する抗体等を使用することができる。

【0035】

酵素としては、測定対象物又は測定対象物から代謝される物質に対して活性を示すものであれば、特に限定されることなく、種々の酵素、例えば酸化還元酵素、加水分解酵素、異性化酵素、脱離酵素、合成酵素等を使用することができる。具体的には、測定対象物がグルコースであれば、グルコースオキシダーゼを、測定対象物がコレステロールであれば、コレステロールオキシダーゼを使用することができる。また、農薬、殺虫剤、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、抗生物質、麻薬、コカイン、ヘロイン、クラック等を測定対象物とする場合には、それらから代謝される物質と特異的反応を示す、例えばアセチルコリンエステラーゼ、カテコールアミンエステラーゼ、ノルアドレナリンエステラーゼ、ドーパミンエステラーゼ等の酵素を使用することができる。

【0036】

微生物としては、特に限定されることなく、大腸菌をはじめとする種々の微生物を使用することができる。

核酸としては、測定の対象とする核酸と相補的にハイブリダイズするものを使用することができる。核酸は、DNA（cDNAを含む）、RNAのいずれも使用できる。DNAの種類は特に限定されず、天然由来のDNA、遺伝子組換え技術により調製した組換えDNA、又は化学合成DNAの何れでもよい。

低分子有機化合物としては通常の有機化学合成の方法で合成することができる任意の化合物が挙げられる。

【0037】

非免疫蛋白質としては、特に限定されることなく、例えばアビジン（ストレプトアビジン）、ビオチン又はレセプターなどを使用できる。

免疫グロブリン結合性蛋白質としては、例えばプロテインAあるいはプロテインG、リウマチ因子（RF）等を使用することができる。

糖結合性蛋白質としては、レクチン等が挙げられる。

脂肪酸あるいは脂肪酸エステルとしては、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘン酸、ステアリン酸エチル、アラキジン酸エチル、ベヘン酸エチル等が挙げられる。

【0038】

生理活性物質が抗体や酵素などの蛋白質又は核酸である場合、その固定化は、生理活性物質のアミノ基、チオール基等を利用し、金属表面の官能基に共有結合させることで行うことができる。

【0039】

上記のようにして生理活性物質を固定化したバイオセンサーは、当該生理活性物質と相互作用する物質の検出及び／又は測定のために使用することができる。

【0040】

即ち、本発明においては、生理活性物質が固定化された上記のバイオセンサーを用いて、これに被験物質を界面活性剤の存在下で接触させることにより、該バイオセンサーに固定化されている生理活性物質と相互作用する物質を検出及び／又は測定することができる。

被験物質としては例えば、上記した生理活性物質と相互作用する物質を含む試料などを使用することができる。

【0041】

本発明では、バイオセンサー用表面に固定化されている生理活性物質と被験物質との相互作用を非電気化学的方法により検出及び／又は測定することが好ましい。非電気化学的方法としては、表面プラズモン共鳴（SPR）測定技術、水晶発振子マイクロバランス（QCM）測定技術、金のコロイド粒子から超微粒子までの機能化表面を使用した測定技術などが挙げられる。

【0042】

本発明の好ましい態様によれば、例えば、透明基板上に配置される金属膜を備えていることを特徴とする表面プラズモン共鳴用バイオセンサーを用いることができる。

【0043】

表面プラズモン共鳴用バイオセンサーとは、表面プラズモン共鳴バイオセンサーに使用されるバイオセンサーであって、該センサーより照射された光を透過及び反射する部分、並びに生理活性物質を固定する部分とを含む部材を言い、該センサーの本体に固着されるものであってもよく、また脱着可能なものであってもよい。

【0044】

表面プラズモン共鳴の現象は、ガラス等の光学的に透明な物質と金属薄膜層との境界から反射された単色光の強度が、金属の出射側にある試料の屈折率に依存することによるものであり、従って、反射された単色光の強度を測定することにより、試料を分析することができる。

【0045】

表面プラズモンが光波によって励起される現象を利用して、被測定物質の特性を分析する表面プラズモン測定装置としては、Kretschmann配置と称される系を用いるものが挙げられる（例えば特開平6-167443号公報参照）。上記の系を用いる表面プラズモン測定装置は基本的に、例えばプリズム状に形成された誘電体ブロックと、この誘電体ブロックの一面に形成されて試料液などの被測定物質に接触させられる金属膜と、光ビームを発生させる光源と、上記光ビームを誘電体ブロックに対して、該誘電体ブロックと金属膜との界面で全反射条件が得られるように種々の角度で入射させる光学系と、上記界面で全反射した光ビームの強度を測定して表面プラズモン共鳴の状態、つまり全反射減衰の状態を検出する光検出手段とを備えてなるものである。

【0046】

なお上述のように種々の入射角を得るためには、比較的細い光ビームを入射角を変化させて上記界面に入射させてもよいし、あるいは光ビームに種々の角度で入射する成分が含まれるように、比較的太い光ビームを上記界面に収束光状態あるいは発散光状態で入射させてもよい。前者の場合は、入射した光ビームの入射角の変化に従って、反射角が変化する光ビームを、上記反射角の変化に同期して移動する小さな光検出器によって検出したり、反射角の変化方向に沿って延びるエリアセンサによって検出することができる。一方後者の場合は、種々の反射

角で反射した各光ビームを全て受光できる方向に延びるエリアセンサによって検出することができる。

【0047】

上記構成の表面プラズモン測定装置において、光ビームを金属膜に対して全反射角以上の特定入射角で入射させると、該金属膜に接している被測定物質中に電界分布をもつエバネッセント波が生じ、このエバネッセント波によって金属膜と被測定物質との界面に表面プラズモンが励起される。エバネッセント光の波数ベクトルが表面プラズモンの波数と等しくて波数整合が成立しているとき、両者は共鳴状態となり、光のエネルギーが表面プラズモンに移行するので、誘電体ブロックと金属膜との界面で全反射した光の強度が鋭く低下する。この光強度の低下は、一般に上記光検出手段により暗線として検出される。なお上記の共鳴は、入射ビームがp偏光のときにだけ生じる。したがって、光ビームがp偏光で入射するように予め設定しておく必要がある。

【0048】

この全反射減衰(ATR)が生じる入射角、すなわち全反射減衰角(θ_{SP})より表面プラズモンの波数が分かると、被測定物質の誘電率が求められる。この種の表面プラズモン測定装置においては、全反射減衰角(θ_{SP})を精度良く、しかも大きなダイナミックレンジで測定することを目的として、特開平11-326194号公報に示されるように、アレイ状の光検出手段を用いることが考えられている。この光検出手段は、複数の受光素子が所定方向に配設されてなり、前記界面において種々の反射角で全反射した光ビームの成分をそれぞれ異なる受光素子が受光する向きにして配設されたものである。

【0049】

そしてその場合は、上記アレイ状の光検出手段の各受光素子が出力する光検出信号を、該受光素子の配設方向に関して微分する微分手段が設けられ、この微分手段が出力する微分値に基づいて全反射減衰角(θ_{SP})を特定し、被測定物質の屈折率に関連する特性を求めることが多い。

【0050】

また、全反射減衰(ATR)を利用する類似の測定装置として、例えば「分光

研究」第47巻 第1号（1998）の第21～23頁および第26～27頁に記載がある漏洩モード測定装置も知られている。この漏洩モード測定装置は基本的に、例えばプリズム状に形成された誘電体ブロックと、この誘電体ブロックの一面に形成されたクラッド層と、このクラッド層の上に形成されて、試料液に接触させられる光導波層と、光ビームを発生させる光源と、上記光ビームを上記誘電体ブロックに対して、該誘電体ブロックとクラッド層との界面で全反射条件が得られるように種々の角度で入射させる光学系と、上記界面で全反射した光ビームの強度を測定して導波モードの励起状態、つまり全反射減衰状態を検出する光検出手段とを備えてなるものである。

【0051】

上記構成の漏洩モード測定装置において、光ビームを誘電体ブロックを通してクラッド層に対して全反射角以上の入射角で入射させると、このクラッド層を透過した後に光導波層においては、ある特定の波数を有する特定入射角の光のみが導波モードで伝搬するようになる。こうして導波モードが励起されると、入射光のほとんどが光導波層に取り込まれるので、上記界面で全反射する光の強度が鋭く低下する全反射減衰が生じる。そして導波光の波数は光導波層の上の被測定物質の屈折率に依存するので、全反射減衰が生じる上記特定入射角を知ることによって、被測定物質の屈折率や、それに関連する被測定物質の特性を分析することができる。

【0052】

なおこの漏洩モード測定装置においても、全反射減衰によって反射光に生じる暗線の位置を検出するために、前述したアレイ状の光検出手段を用いることができ、またそれと併せて前述の微分手段が適用されることも多い。

【0053】

また、上述した表面プラズモン測定装置や漏洩モード測定装置は、創薬研究分野等において、所望のセンシング物質に結合する特定物質を見いだすランダムスクリーニングへ使用されることがあり、この場合には前記薄膜層（表面プラズモン測定装置の場合は金属膜であり、漏洩モード測定装置の場合はクラッド層および光導波層）上に上記被測定物質としてセンシング物質を固定し、該センシング

物質上に種々の被検体が溶媒に溶かされた試料液を添加し、所定時間が経過する毎に前述の全反射減衰角 (θ S P) の角度を測定している。

【0 0 5 4】

試料液中の被検体が、センシング物質と結合するものであれば、この結合によりセンシング物質の屈折率が時間経過に伴って変化する。したがって、所定時間経過毎に上記全反射減衰角 (θ S P) を測定し、該全反射減衰角 (θ S P) の角度に変化が生じているか否かを測定することにより、被検体とセンシング物質の結合状態を測定し、その結果に基づいて被検体がセンシング物質と結合する特定物質であるか否かを判定することができる。このような特定物質とセンシング物質との組み合わせとしては、例えば抗原と抗体、あるいは抗体と抗体が挙げられる。具体的には、ウサギ抗ヒト I g G 抗体をセンシング物質として薄膜層の表面に固定し、ヒト I g G 抗体を特定物質として用いることができる。

【0 0 5 5】

なお、被検体とセンシング物質の結合状態を測定するためには、全反射減衰角 (θ S P) の角度そのものを必ずしも検出する必要はない。例えばセンシング物質に試料液を添加し、その後の全反射減衰角 (θ S P) の角度変化量を測定して、その角度変化量の大小に基づいて結合状態を測定することもできる。前述したアレイ状の光検出手段と微分手段を全反射減衰を利用した測定装置に適用する場合であれば、微分値の変化量は、全反射減衰角 (θ S P) の角度変化量を反映しているため、微分値の変化量に基づいて、センシング物質と被検体との結合状態を測定することができる（本出願人による特願 2 0 0 0 - 3 9 8 3 0 9 号参照）。このような全反射減衰を利用した測定方法および装置においては、底面に予め成された薄膜層上にセンシング物質が固定されたカップ状あるいはシャーレ状の測定チップに、溶媒と被検体からなる試料液を滴下供給して、上述した全反射減衰角 (θ S P) の角度変化量の測定を行っている。

【0 0 5 6】

さらに、ターンテーブル等に搭載された複数個の測定チップの測定を順次行うことにより、多数の試料についての測定を短時間で行うことができる全反射減衰を利用した測定装置が、特開 2 0 0 1 - 3 3 0 5 6 0 号公報に記載されている。

【0057】

バイオセンサーを表面プラズモン共鳴分析に使用する場合、上記したような各種の表面プラズモン測定装置の一部として適用することができる。

以下の実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0058】**【実施例】****実施例 1：バイオセンサー用チップの作製**

(1) ポリメチルメタクリレートでコーティングしたバイオセンサー用チップの作製

金膜の厚さが500オングストロームになるように金を蒸着した1cm(1cmのカバーガラスをModel-208UV-オゾンクリーニングシステム (TECHNOVISION INC.) で30分処理した後、スピコート機 (MODEL ASS-303、ABLE製) にセットし1000rpmにて回転させ、金蒸着カバーガラス中央にポリメチルメタクリレートのメチルエチルケトン溶液 (2mg/ml) を $50\mu\text{l}$ 滴下し、2分後に回転を止めた。エリプソメトリー法 (In-Situ Ellipsometer MAUS-101、Five Lab製) により膜厚を測定したところ、ポリメタクリル酸メチル膜の厚さは200オングストロームであった。このサンプルをPMMA表面チップと呼ぶ。

【0059】

(2) PMMA表面へのCOOH基の導入

上記のように作成したポリメチルメタクリレートをコーティングしたカバーガラスをNaOH水溶液 (1N) に40℃16時間浸漬した後、水で3回洗浄した。このサンプルをPMMA/COOH表面チップと呼ぶ。

【0060】

(3) 生理活性物質を固定化する表面の作成

上記のように作成したPMMA/COOH表面チップを市販の表面プラズモン共鳴バイオセンサー (ピアコア社製、BIACORE3000) のカートリッジブロック上に設置し、1-エチル-2,3-ジメチルアミノプロピルカルボジイミド (400mM) とN-ヒドロキシスクシンイミド (100mM) との混合液 $300\mu\text{L}$ を流速1

0 μ L/min で測定セルに流した。

その後、5-アミノ吉草酸溶液（1M、pH8.5）を 300 μ L を流速 10 μ L/min で測定セルに流した。このサンプルを PMMA/val 表面チップと呼ぶ。

【0061】

比較例 1：表面コーティングを行わない金表面チップの作製

金膜の厚さが 500 オングストロームになるように金を蒸着した 1cm (1cm のカバーガラスを Model-208 UV-オゾンクリーニングシステム (TECHNOVISION INC.) で 30 分処理した。このサンプルを金表面チップと呼ぶ。

【0062】

比較例 2：SAM 化合物（7-カルボキシー 1-ヘプタンチオール）で被覆処理したバイオセンサー用チップの作製（SAM：自己組織化膜）

金蒸着膜が 50nm の 1cm (1cm のカバーガラスをオゾンクリーナーで 30 分処理した後、1mM の 7-カルボキシー 1-ヘプタンチオール（同仁化学）のエタノール溶液に浸して、25℃で 18 時間表面処理を行った。その後、40℃でエタノール 5 回、エタノール/水混合溶媒で 1 回、水で 5 回洗浄した。このサンプルを SAM 表面チップと呼ぶ。

【0063】

実施例 2：バイオセンサー用チップの性能評価：

（1）蛋白質の非特異吸着の測定

バイオセンサー表面に対する非特異的な蛋白質の吸着はノイズの原因となる為、極力少ないほうが好ましい。以下のサンプル 1-1～1-4 において BSA（シグマ製）、アビジン（ナカライテスク製）の非特異吸着性を調べた。

【0064】

サンプル 1-1：表面処理を行っていない金表面チップ（比較例 1 の方法で作製）

サンプル 1-2：SAM 表面チップ（比較例 2 の方法で作製）において COOH 基をエタノールアミンでブロックしたチップ

サンプル 1-3：PMMA/COOH 表面チップ（実施例 1 の（2）の方法で作製）において COOH 基をエタノールアミンでブロックしたチップ

サンプル 1-4: PMMA/val 表面 (実施例 1 の (3) の方法で作製) において COOH 基をエタノールアミンでブロックしたチップ

【0065】

上記サンプル 1-2 ~ サンプル 1-4 の COOH 基のエタノールアミンによるブロックは以下の方法で行った。各チップを市販の表面プラズモン共鳴バイオセンサー (ビアコア社製、BIACORE3000) のカートリッジブロック上に設置し、1-エチル-2, 3-ジメチルアミノプロピルカルボジイミド (400 mM) と N-ヒドロキシスクシンイミド (100 mM) との混合液 100 μ L を流速 10 μ L/min で測定セルに流した。その後、エタノールアミン・HCl 溶液 (1M、pH8.5) 100 μ L を流速 10 μ L/min で測定セルに流した。

【0066】

バッファー A: HBS-N バッファー (ビアコア社製、pH7.4)

バッファー B: HBS-EP バッファー (ビアコア社製、pH7.4)

バッファー C: tween20 (アルドリッチ社製) 0.005g を HBS-N バッファー (ビアコア社製、pH7.4) で合計 100 ml にしたバッファー

バッファー D: TRITON-X100 (ICI 社製) 0.005g を HBS-N バッファー (ビアコア社製、pH7.4) で合計 100 ml にしたバッファー

【0067】

上記で用いた HBS-N バッファーの組成は、H E P E S (N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid) 0.01mol/l (pH7.4)、N a C l 0.15mol/l である。また、HBS-EP バッファーの組成は、H E P E S 0.01mol/l (pH7.4)、N a C l 0.15mol/l、E D T A 0.003mol/l、S u r f a c t a n t P 2 0 0.005 重量% である。

【0068】

上記サンプル 1-1 ~ 1-4 を表面プラズモン共鳴バイオセンサー (ビアコア社製、BIACORE3000) のカートリッジブロック上に設置し、上記バッファー A ~ D (pH7.4) を 10 分間流した後、BSA 溶液 (1 mg/ml、上記バッファー A ~ D (pH7.4) で溶解) あるいはアビジン溶液 (1 mg/ml、上記バッファー A ~ D (pH7.4) で溶解) 50 μ l を流速 10 μ l/min で測定セルに流した

。BSA溶液あるいはアビジン溶液の注入終了から 3 分後の共鳴シグナル（RU値）変化量を各蛋白質の非特異吸着量とした。

【 0 0 6 9 】

（ 2 ） 結果

表 1 に蛋白質の非特異吸着の測定結果を示す。

【 0 0 7 0 】

【表 1】

表1

サンプル	非特異吸着量 (RU値)							
	バッファ-A		バッファ-B		バッファ-C		バッファ-D	
	BSA	アビジン	BSA	アビジン	BSA	アビジン	BSA	アビジン
1-1	2084	3153	594	844	576	832	723	1022
1-2	1520	1023	207	618	199	611	306	714
1-3	1426	625	28	85	27	83	39	102
1-4	1310	598	29	84	26	80	34	96

太枠部分が本発明

【0071】

表1の結果から、本発明の方法により、極めて蛋白質の非特異吸着の少ない検出または測定方法を提供できることがわかる。

【0072】

【発明の効果】

本発明により、バイオセンサーを用いた生理活性物質と相互作用する物質を検出または測定する方法において被験物質中の夾雑物の非特異吸着を抑制した方法を提供することが可能になった。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 バイオセンサーを用いた生理活性物質と相互作用する物質を検出または測定する方法において被験物質中の夾雑物の非特異吸着を抑制する方法を提供すること。

【解決手段】 疎水性高分子化合物でコーティングした基板から成るバイオセンサーの表面に結合した生理活性物質と相互作用する物質を検出又は測定する方法において、該検出又は測定を界面活性剤の存在下で行う上記の方法。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 0 5 8 7 2 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社